

CPV Ag Test

Canine Parvovirus Antigen Test





CPV Ag Test

آزمایش تشخیص سریع آنتی ژن پاروویروس سگ سانان

ویروس عامل بیماری پاروویروس سگ بسیار مسری می‌باشد و سبب نشانه‌های گوارشی حاد در سنین ۶ تا ۲۰ هفتگی در سگ‌ها و سایر حیوانات می‌شود. ویروس بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تماس با مدفوع آلوده منتقل می‌گردد. نشانه‌های بالینی به صورت بی حالی، بی اشتها، شکم درد، تب، استفراغ و اسهال شدید و خونی مشاهده می‌شود.

معرفی کیت

آزمون ایمونوکروماتوگرافیک

روش شناسی

پادگن پاروویروس سگ

هدف

مدفوع

نمونه

۱. حساسیت: ۹۵/۷۴ درصد در برابر پی سی آر

ویژگیها

۲. اختصاصیت: ۱۰۰ درصد در برابر پی سی آر

۵ تا ۱۰ دقیقه


مدت زمان آزمایش

اجزای جعبه کیت

تعداد	اجزای کیت
۱۰	کاست آزمایش
۱۰	قطره چکان یکبار مصرف
۱۰	بافر استخراج نمونه
۱۰	سواب استریل
۱	راهنمای انجام آزمایش

روش آزمون

۱. جمع آوری نمونه: نمونه گیری با استفاده از سواب استریل از مدفوع تازه سگ، مقعد سگ و یا استفراغ آن انجام می‌شود.
۲. بعد از نمونه گیری، سواب نمونه را در تیوب حاوی بافر فرو برده و چرخانده و بمدت یک دقیقه صبر کنید.
۳. بوسیله قطره چکان از مایع رویی برداشت شود.
۴. چهار قطره در چاهک نمونه روی کاست ریخته شده و در دمای اتاق به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قرار دهید.

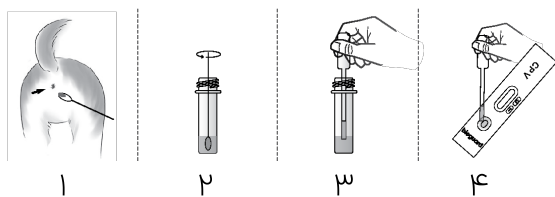

تفسیر نتایج

مثبت: تشکیل دو باند رنگی قرمز


منفی: تشکیل یک باند رنگی قرمز در خط کنترل

نامعتبر: عدم تشکیل خط رنگی در خط کنترل

مثبت کاذب: اخیرا واکسیناسیون انجام شده است.

منفی کاذب: در مراحل ابتدایی و پایانی عفونت که میزان دفع ویروس کافی نیست.

عمر قفسه ای: ۲۴ ماه

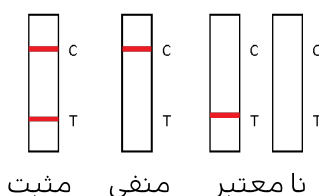

مثبت

منفی

نامعتبر



تولید کننده: شرکت bioguard

نماینده انحصاری در ایران شرکت آتی داران دارو



واردکننده: آتی داران دارو

تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان،

کوچه خلخال، پلاک ۲۹، واحد ۴

02166569697

02166569695

www.atidaroo.com

info@atidaroo.com